

AEROresc®

EASY Collar | Zervikalkragen



AEROresc®

EASY Collar | Zervikalkragen

AEROresc® - Cervical Collar | Zervikalkragen

Der AEROresc® - EASY Collar ist ein größenverstellbarer Zervikalkragen, der für die sichere Immobilisation der Halswirbelsäule (HWS) eingesetzt wird. Er schränkt die Bewegungsfreiheit der HWS zuverlässig ein und übernimmt einen Teil ihrer Stützfunktion.

Die Feinrastrung beider Modelle erlaubt eine einfache und individuelle Größeneinstellung mit möglicher Positionierung auch zwischen den Standardgrößen. Der Zervikalkragen hat dank der sich selbst aufrichtenden Kinnstütze ein sehr flaches Design und lässt sich platzsparend im Notfallbehälter oder RTW verstauen.

So sind Sie im Notfall mit nur 2 Modellen für jeden Patiententyp, vom Kleinkind bis hin zum großwüchsigen Erwachsenen, jederzeit bestens vorbereitet.

EASY Collar - Größte Stabilität bei höchstmöglichem Tragekomfort.

Überzeugende Vorteile

- Zuverlässige Einschränkung der Bewegungsfreiheit
- Verriegelungsmechanismus garantiert hohe Stabilität
- Symmetrische Größeneinstellung dank Führungsschienen
- Einfache und schnelle Größenauswahl durch Fingertechnik
- Selbstaufrichtende anatomische Kinnstütze
- Überdimensionale Zugänge front- und rückseitig für Pulskontrolle, Atemweg-Management, Sicht auf den Kehlkopf, Palpation
- Befestigungshaken für O₂-Schläuche links- und rechtsseitig
- Röntgenstrahlendurchlässig, CT & MRT tauglich
- Platzsparendes Verstauen dank flachem Design
- Hochwertige Materialien - Hypoallergen, latex- und PHT-frei
- Bedienungsanleitung auf Produkt - immer zur Hand

Die Modelle



AEROresc® - EASY Collar Mini

Kleinkinder | Kinder | Kleine Erwachsene
Maße: 45 x 14 cm | Gewicht: ca. 70 g



AEROresc® - EASY Collar Adult

Erwachsene: Neckless | Short | Regular | Tall
Maße: ca. 57 x 18 cm | Gewicht: ca. 120 g

2 Versionen: Mini | Adult



AEROresc® - EASY Collar Mini




AEROresc® - EASY Collar Adult

Einsatzbereiche

- Rettungsdienst
- Klinik

Einfache Handhabung

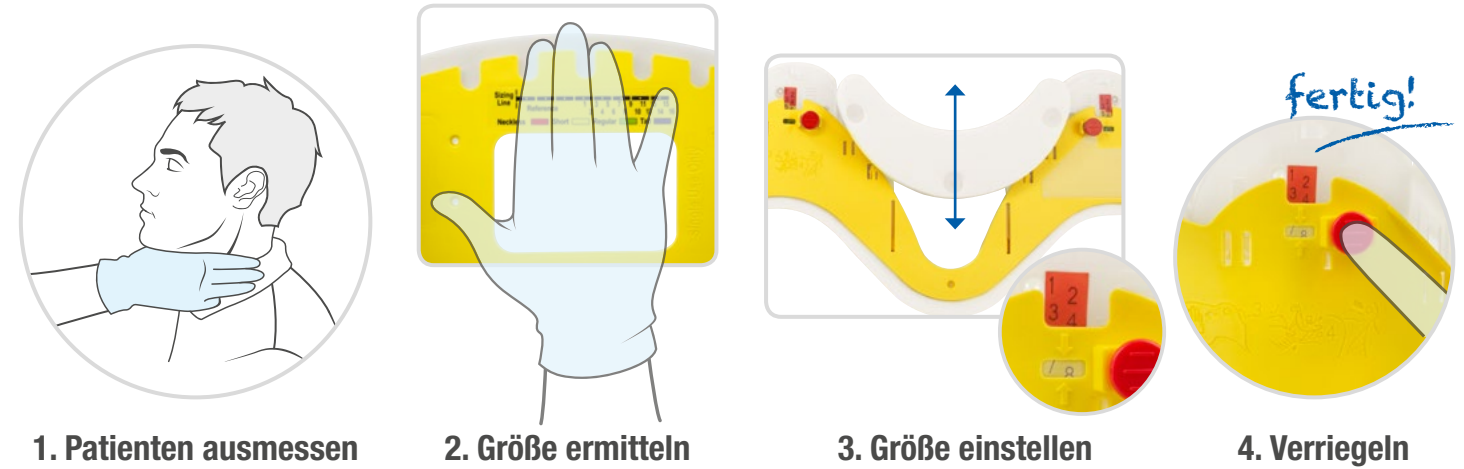

Befestigungshaken für O₂-Schläuche

- Links- und rechtsseitig
- Sichere Fixierung von O₂-Schläuchen

Komfortable Kinnstütze

- Richtet sich beim Anlegen auf
- Anatomisch und weich gepolstert

Flexible Größeneinstellung

- Symmetrische Größeneinstellung
- 16 Stufen Adult-Version:
1-4 Neckless | 5-8 Short | 9-12 Regular
13-16 Tall
- 12 Stufen Mini-Version:
1-4 Kleinkinder | 5-8 Kinder
9-12 Kleine Erwachsene

Verschlussystem

- Garantiert hohe Stabilität
- Auffällige Verriegelungsknöpfe für schnelles Erkennen

Übergroße Zugänge front- und rückseitig





- Palpation der Halswirbelsäule
- Bessere Luftzirkulation



- Pulskontrolle
- Sicht auf den Kehlkopf
- Atemwegsmanagement

Lieferprogramm Cervical Collar | Zervikalkragen

AEROresc® - Cervical Collar | Zervikalkragen

Best.-Nr.	Beschreibung		Maße / Gewicht
HIMT11-EC-K	AEROresc® - EASY Collar Mini, Zervikalkragen für Kleinkinder, Kinder und kl. Erwachsene, VE = 20 Stk		45 x 14 cm / 70 g
HIMT11-EC-E	AEROresc® - EASY Collar Adult, Zervikalkragen für Erwachsene, VE = 20 Stk.		57 x 18 cm / 120 g

